

バイオハザード防止オートクレーブ **LB**

バイオハザードの発生源を
室内に排出しない完全密閉式！

HB-305M


**BIOHAZARD
PREVENTIVE
AUTOCLAVE**



ISO 13485 認証取得

このカタログの製品は
ISO13485の認証を受けた
会社で製造した製品です。

より安心、確実な医・理化学機器をめざす **ヒラヤマ**

病原性微生物や遺伝子組み換え病源体などの バイオハザード発生源を 室内に排出すること無く、封じ込めたまま滅菌処理

主な特長

■エアロゾル防止

完全密閉式のため未滅菌空気・未滅菌水蒸気などに付着した病原性微生物を放出しません。

■物理的封じ込め

完全密閉式のためフィルター(0.22 μ m)を楽に透過してしまうウィルスでも放出しません。

■安全性が高く管理が簡単

二次感染の危険が発生しやすいフィルター交換も無く管理が、極めて簡単で、ランニングコストが安価です。

■安価な設備費

キルタンクのように膨大な設備費、大きなスペースがない施設でも実験室内に設置可能なので病原性微生物の処理も安全に行えます。

■簡単な設置

小型圧力容器構造規格品なので設置に関する付帯工事は不要で電源があれば何処へでも移動、設置が可能です。


■高温、長時間滅菌

最高温度123℃、最長タイマー999分のため、ラットやウサギなどの温度が浸透しにくい実験動物の滅菌にも最適です。

■感染性廃棄物の安全処理

感染性廃棄物の処理の基本は、移送せず発生源にて滅菌処理するのが一番安全性が高く確実性があります。

LB [規格・仕様]

型 式	HB-305M
外 寸 法	W504×D697×H987 mm
内 寸 法	φ300×D400 mm (28ℓ)
重 量 (約)	80kg
電 源 (熱源)	AC100V 2.0kW (20A)
圧力容器の種類	小型圧力容器
缶 体 材 質	ステンレス(SUS304)
滅菌温度範囲	105~123℃
滅菌タイマー	1~999分 残時間表示方式 連続運転機能付
選 択 コ ー ス	準備→加熱→滅菌(調整可能)→完了
排 気 制 御	微細排気バルブによる調整可能
排気ポトル(満水時)	13ℓ 内蔵式
安全弁動作圧力	0.549MPa
温 度 計	デジタル表示 5~126℃
圧 力 計	0~1MPa
安全・警報装置	圧力安全弁・過圧防止スイッチ・過電流ブレーカー・空焚防止装置 エラー表示(空焚・センサー断線・過圧・ヒーター異常)
付 属 品	排気ポトル1ヶ・滅菌缶1ヶ・アイボトル締め付け金具1ヶ
電源接続部形状	丸端子  3m
価 格	¥1,090,000

*丸端子には、プラグが付属されておられませんのでご用意願います。


*海拔800m以上(山岳地域等の低気圧状態)でご使用になる場合は、ご注文の際にご相談ください。

システムアップの オプション機器

オプション



記録計 1P(ES-600)
(温度センサー1本付)
¥240,000
(各校正費用別)

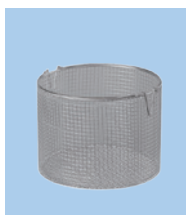

ステンレス製丸型金網カゴ
φ270×H210mm
¥13,000
φ270×H270mm
¥14,000




ステンレス製滅菌缶
φ270×H210mm
¥22,000
φ270×H270mm
¥23,000



オートクレープ用洗浄剤リスター
オートクレープ用の強力
洗剤で缶体の内部を洗浄。
(約25回分) ¥6,500



オートクレープ用
消臭剤デオドライザー
(100錠/瓶) ¥10,000

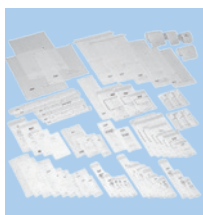

滅菌テープ・ラベル・バッグ
各種お問い合わせ下さい。



廃棄物処理用
エスクリニカバッグ
A 500×700mm 200枚入
¥22,000
B 620×820mm 200枚入
¥26,000

LB: 理化学機器(LABO)

●表示価格は、全て税別価格になります。●価格、仕様、外觀などは、製品改良などによりやむを得ず変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

代理店

ISO 13485 認証取得

株式会社 平山製作所

本 社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384
大 阪 支 店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062
仙 台 事 務 所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688
福 岡 事 務 所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870
サ ー ビ ス セ ン タ ー 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384
ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス <http://www.hirayama-hmc.co.jp/>

●サービス拠点 札幌、青森、大阪、広島

J19.03.50.HIR